



TOP MED

Produtos a serviço da sua saúde

SONDA FOLEY 2 E 3 VIAS

Marca: TOP MED®

Procedência: Índia

Reg. Ms: 80614390035

Classe de Risco: II



TOP MED

Produtos a serviço da sua saúde

Especificações para todos os modelos:


As Sondas de Foley de 2 e 3 Vias com Balão são confeccionadas em látex de borracha natural, são maleáveis com paredes fortes para evitar torções e colapsos e possuem ponta atraumática.

Os Corpos A e B são confeccionados em poliestireno de alto impacto não tóxico. Mola em aço inoxidável AISI 304, Washer (para conexão com a seringa): PVC Washer holder: poliestireno de alto impacto não tóxico (HIPS), Holder cap: poliestireno de alto impacto não tóxico (HIPS)

Aspecto: Sem nenhuma partícula estranha presente em todo o material, Tubo liso e claro, Ponta fechada e lisa, Acidez ou alcalinidade: Não mais que 1MI, Materiais Oxidáveis: Não mais que 1 ppm, Metais pesados: Não mais que 0.005gm, Matéria não volátil: Não mais que 2,0 mL, Teste de esterilidade: Estéril, Endotoxinas bacterianas: Sem formação de coágulos em gel.

Top Med Importação e Distribuição Ltda.

CNPJ: 11.172.836/0001-90 AFE: 8.06.143-9 (K92XWH06HW1L)
Av. Brasil Sul Galpão 01 nº. 4175 Qd.02 Lt.03E Setor Sul Jamil Miguel
Anápolis – GO CEP: 75.124-820 Fone: (62)3642-9442

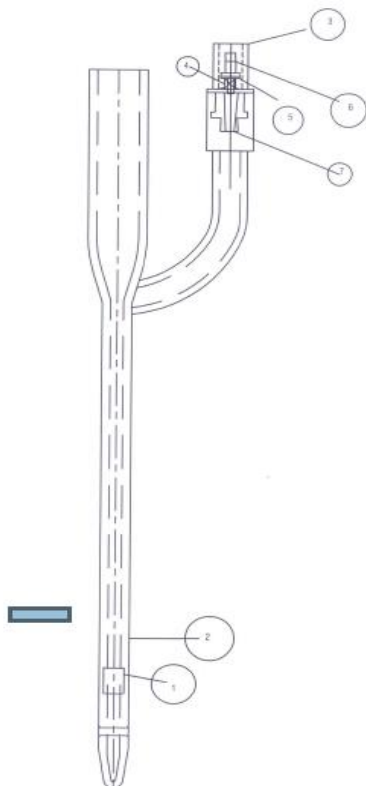

1 - As Sondas de Foley de 2 e 3 Vias com Balão são confeccionadas em látex de borracha natural, são maleáveis com paredes fortes para evitar torções e colapsos e possuem ponta atraumática.



2 e 3 - Os Corpos A e B são confeccionados em poliestireno de alto impacto não tóxico.

4 - Mola em aço inoxidável AISI 304.

5 - Washer (para conexão com a seringa): PVC

6 - Washer holder: poliestireno de alto impacto não tóxico (HIPS).

7 - Holder cap: poliestireno de alto impacto não tóxico (HIPS).

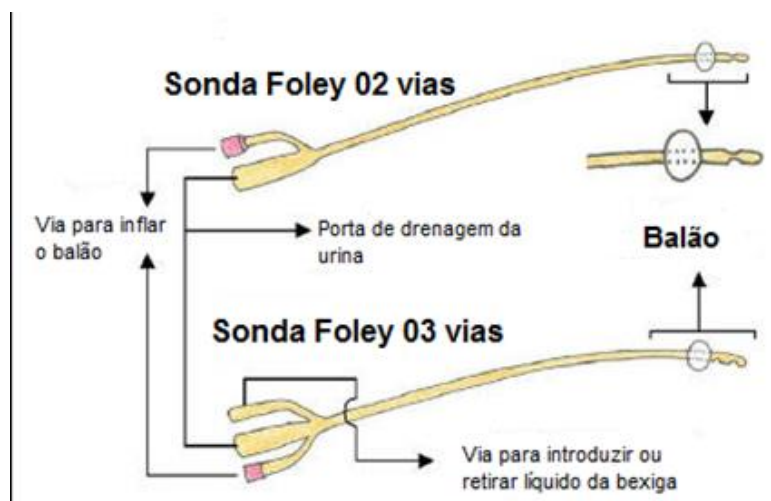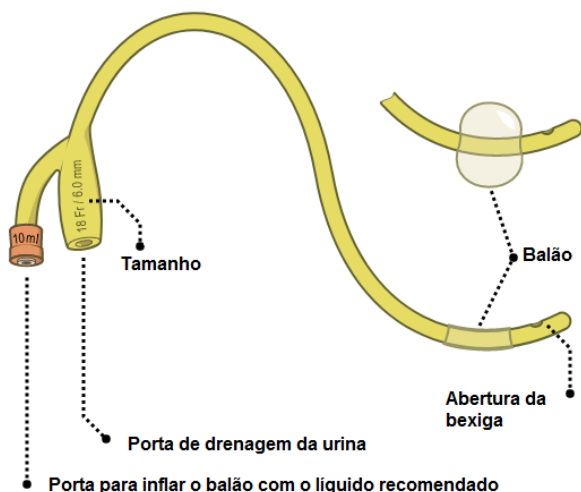

Produto de uso único esterilizado por óxido de etileno

Transporte e armazenagem:

Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada ou violada ou se o produto estiver vencido. Armazene e transporte o produto em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta e em sua embalagem original, sob temperatura: -10° à 60°C Umidade relativa: 30 a 95% (não condensante).

Modo de uso do produto:

INSTRUÇÕES DE USO:

- Lubrifique a sonda utilizando um lubrificante ou gel com base de água (com ou sem anestésico) local, segundo a necessidade).
- Usando técnica estéril tal como está indicado na literatura publicada, insira toda a sonda na uretra, certificando-se de que o balão fique além do colo vesical.
- Utilize seringa com ponta tipo Luer para encher o balão.
- Encha o balão com água destilada.
- A capacidade do balão está indicada no funil da sonda e no rótulo da embalagem. Não encha demasiado o balão.
- Assegure-se de que está funcionando bem verificando o fluxo de urina que sai do funil da sonda.
- Antes de retirar a sonda, esvazie o balão utilizando uma seringa Luer adequada.
- Com o auxílio da seringa, aspirar com suavidade para remover o líquido de enchimento do balão. Não aspire excessivamente durante o esvaziamento pois pode causar um colapso do lúmen o que pode prejudicar a drenagem normal.

SONDA FOLEY 2 E 3 VIAS

Marca: TOP MED®

Procedência: Índia

Reg. Ms: 80614390035

Classe de Risco: II

Top Med Importação e Distribuição Ltda
Avenida Brasil, Setor Jamil Miguel Sul, no 4.175, Quadra 2,
Lote 3E, Galpão 01 - Anápolis - GO - Brasil - CEP 75124-820
www.topmedbrasil.com.br - sac@topmedbrasil.com.br
Responsável Técnico: Juliana Lima - CRF-GO 1429200