


Referência do Produto - RP-380113
Registro de Produto no MS: 80305560049

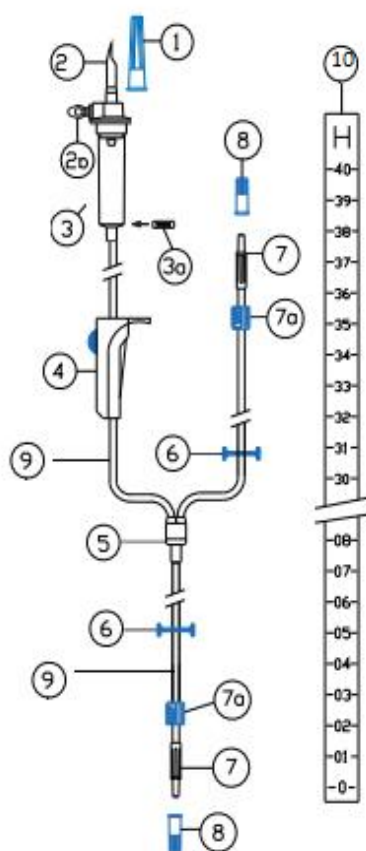

O equipamento **TRO-SOLUSET BR PVC - CÂMARA FLEXÍVEL 2 VIAS COM SEGMENTO 60 CM**

REVERSIVEL LUER LOCK é um equipamento de medida hemodinâmica frequente na UTI. É determinada pela interação entre o volume intravascular, função do ventrículo direito, tônus vasomotores e pressão intratorácica.

Composição:

- 1 – Protetor do penetrador adequado para garantir a esterilidade do produto
- 2 e 2a – Penetrador com entrada de ar e filtro (2a) hidrófobo/bacteriológico com tampa protetora, para adaptação em ampolas/bolsas plásticas, e frascos conforme ISO 8536-4 com gotejador para 20 gotas = 1 ml
- 3 e 3a – Câmara flexível – em PVC de boa maleabilidade e transparência em material atóxico de grau médico, com filtro de partículas de 15 micra.
- 4 – Pinça rolete com corta-fluxo e descarte para ponta perfurante de fácil manuseio com estabilidade na taxa de gotejamento.
- 5 – Derivação em Y cristal atóxico grau médico
- 6 – Corta-fluxo de fácil manuseio
- 7 – Conector luer macho conforme norma NBR ISO 594 - 1 e 2.
- 7a – Conector luer lock reversível – em material transparente para conexão em cone fêmeas padrão 6%, conforme NBR ISO 592- 1 e 2.
- 8 – Protetor conector luer lock adequado para garantir a esterilidade do produto, com filtro hidrófobo 0.8 micras para preenchimento do equipo e retirada do ar.
- 9 – Tubo flexível **FREE DEHP** atóxico grau médico com boa flexibilidade e diâmetro uniforme
- 10 – Fita graduada de 60 cm.

O equipamento **TRO-SOLUSET BR PVC - CÂMARA FLEXÍVEL 2 VIAS COM SEGMENTO 60 CM**

REVERSIVEL LUER LOCK é estéril e para uso único. A esterilização é feita por óxido de etileno. A validade é de 3 anos.

O equipamento **TRO-SOLUSET BR PVC - CÂMARA FLEXÍVEL 2 VIAS COM SEGMENTO 60 CM**

REVERSIVEL LUER LOCK está de acordo com as normas ISO 594 - 1 e 2 para produtos médicos classe II e é devidamente registrado na ANVISA.

Cada O equipamento **TRO-SOLUSET BR PVC - CÂMARA FLEXÍVEL 2 VIAS COM SEGMENTO 60 CM**

REVERSIVEL LUER LOCK é embalado em uma embalagem tipo blister formada por uma bolsa plástica dupla de polietileno, grau médico, e papel grau cirúrgico. Esta embalagem é então colocada dentro de uma caixa de papelão, onde são colocadas 100 peças.