

AGULHA DESCARTÁVEL - marca UNIT


Procedência : NACIONAL

Agulha tipo TRU-CUT - SEMI-AUTOMÁTICA

Agulha para biópsia de TECIDOS MOLES - Cod. TC-S1

Registro no MS : 10287070058

- Tamanho da Amostra = 10 mm ou 19 mm (aproximadamente)


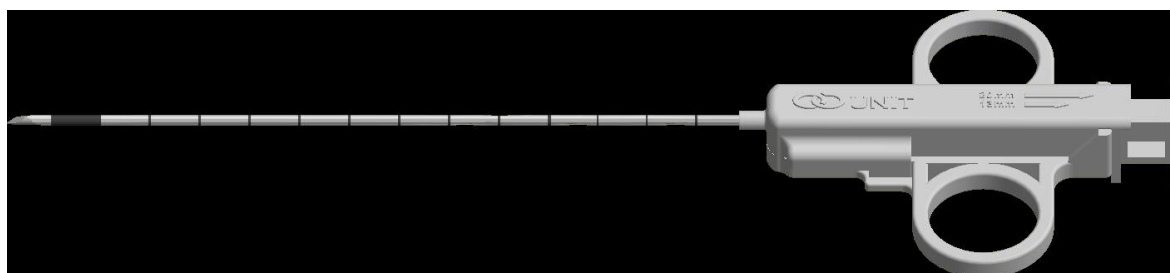


Diâmetro		COMPRIMENTO						
Gauge	mm	10 cm	12 cm	15 cm	16 cm	20 cm	25 cm	30 cm
12G	2.8	TC-S1 12/10	TC-S1 12/12	-	-	-	-	-
14G	2.0	TC-S1 14/10	TC-S1 14/12	-	TC-S1 14/16	TC-S1 14/20	-	-
16G	1.6	TC-S1 16/10	-	-	TC-S1 16/16	TC-S1 16/20	TC-S1 16/25	TC-S1 16/30
18G	1.2	TC-S1 18/10	-	TC-S1 18/15	TC-S1 18/16	TC-S1 18/20	TC-S1 18/25	TC-S1 18/30
20G	0.9	TC-S1 20/10	-	-	TC-S1 20/16	TC-S1 20/20	-	-
Indicação		Mama		Fígado – Rim – Próstata – Abdômen				

- Agulha semi-automática é conhecida como tipo "TESOURINHA"

- Agulha tipo TRU-CUT é também chamada de tipo "GUILHOTINA"

DESCRIPTIVO da AGULHA: Agulha tipo tru-cut semi-automática, DESCARTÁVEL, para biópsia de tecidos moles. A cânula, o mandril e as molas internas são confeccionados em aço inoxidável A.I.S.I. 304 e a estrutura de policarbonato grau médico. A agulha é composta de uma cânula externa centimetrada e com a ponta biselada; de um mandril biselado e com rebaixo de aproximadamente 20 milímetros em sua extremidade distal, para alojar o material coletado, possui marcação ecogênica. Embalagem individual com os dados de identificação, procedência, número do lote e número do RMS, conforme a legislação vigente.

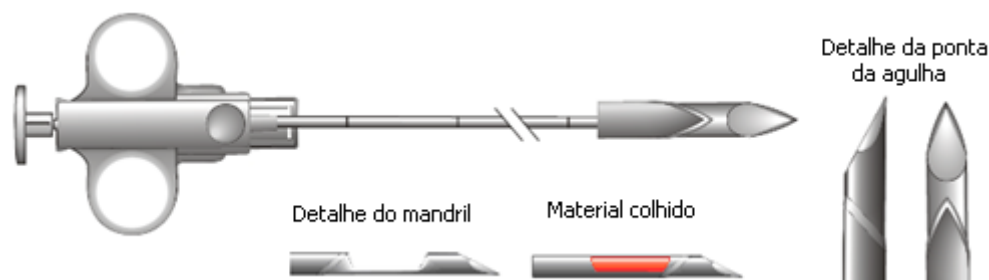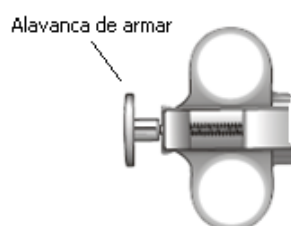INSTRUÇÃO DE USO**AGULHA SEMI-AUTOMÁTICA PARA BIÓPSIA DE TECIDO MOLE – CÓDIGO TC-S1****DETALHE dos CABOS – ALAVANCA DE ARMAR**

01. O procedimento é realizado em local asséptico de acordo com a técnica padronizada pela unidade de saúde;
02. Verificar a data de validade e a integridade da embalagem estéril;
03. Certificar-se de que o produto esteja isento de qualquer tipo de dano;
04. Verificar se o produto se aplica para a finalidade desejada, em relação a suas dimensões e ao modelo;
05. Preparar o paciente de acordo com o protocolo correspondente à técnica médica utilizada;
06. O mais próximo possível do momento do uso, abrir a embalagem do produto e retirar as proteções;
07. Armar a agulha puxando a alavanca de armar no cabo (ver desenho acima) até escutar o “ clic” da trava da mola do mecanismo interno do cabo. Nesta situação a agulha está armada;
08. Na região do corpo do paciente, pré marcada pelo médico, introduzir a agulha até atingir o limite onde se inicia a região onde será coletado o material para biópsia, acompanhando o posicionamento da ponta da agulha através do ultrassom;
09. Apertar a alavanca de armar na direção contrária de quando a agulha foi armada, destravando a mola provocando o disparo da agulha na direção do interior da região onde será coletado o material para biópsia;
10. Disparada a agulha, primeiramente se movimenta o seu mandril para o interior da região onde se fará a coleta de material e, em seguida, se movimenta a cânula cortando o tecido que se acomodou no rebaixo do mandril, fechando este rebaixo e evitando a saída do material colhido;
11. Retirar agulha puxando pelo cabo no sentido contrário ao de sua penetração;
12. Remover a amostra coletada, avançando o mandril da agulha até aparecer o seu rebaixo com a amostra acomodada dentro dele e enviá-la ao laboratório de patologia;
13. Finalizado o procedimento fazer o descarte da agulha em local apropriado para materiais cortantes potencialmente contaminados.

CUIDADOS :

- Estas instruções são apenas de orientação geral.
- Cada médico deve adotar o procedimento apropriado em função de seus próprios conhecimentos e experiência, no tipo de procedimento a ser realizado.

ADVERTÊNCIAS E/OU PRECAUÇÕES A SEREM ADOTADAS :

ESTÉRIL.

PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO.

PROIBIDO REPROCESSAMENTO.

DESCARTAR APÓS O USO.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO :

Estocar a temperatura ambiente ao abrigo da umidade e incidência direta da luz.

DESCARTE :

- Descartar o conjunto usado em local apropriado para materiais cortantes, potencialmente contaminados.



UNIT Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

FONE: (11) 5536.9331 – FAX: (11) 5542.6850 – E-mail: unit.ciel@terra.com.br



AGULHA

AGULHA SEMI-AUTOMÁTICA PARA BIÓPSIA DE TECIDO MOLE

INSTRUÇÕES DE USO

FINALIDADE:

A **AGULHA SEMI-AUTOMÁTICA PARA BIÓPSIA DE TECIDO MOLE** destina-se a retirar uma determinada quantidade de tecido para análise laboratorial com o objetivo de auxiliar no diagnóstico de uma patologia. Indicada em biópsia de tecido mole, glândulas mamárias, fígado, rins, próstata e abdômen.

APRESENTAÇÃO:

A **AGULHA SEMI-AUTOMÁTICA PARA BIÓPSIA DE TECIDO MOLE** é acondicionada individualmente em embalagem termoselada e apresentada em caixas contendo de **01** (uma) a **30** (trinta) unidades, por caixa.


DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:

Composição: A **AGULHA SEMI-AUTOMÁTICA PARA BIÓPSIA DE TECIDO MOLE** é formada por uma cânula e de um mecanismo interno de mola e trava no cabo, em aço inoxidável A.I.S.I. 304 e a estrutura (canhão) em policarbonato grau médico.

AS CORES DAS FIGURAS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

APRESENTAÇÃO da AGULHA SEMI-AUTOMÁTICA PARA BIÓPSIA DE TECIDO MOLE


Modelo: TC-S1

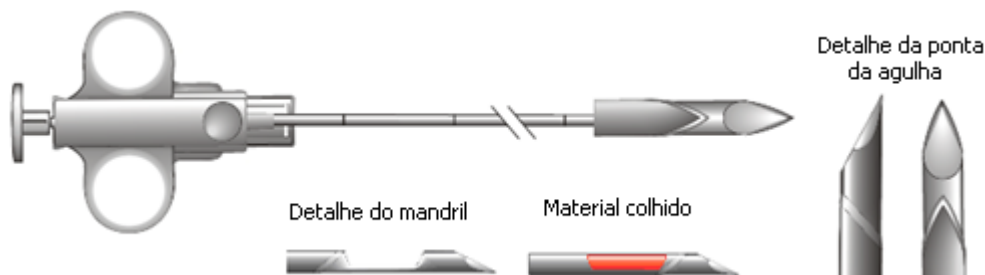

Diâmetro		C O M P R I M E N T O					
Gauge	mm	6	8	10 cm	12 cm	16 cm	20 cm
12G	2.8	TC-S1 12/06	TC-S1 12/08	TC-S1 12/10	TC-S1 12/12	TC-S1 12/16	TC-S1 12/20
13G	2.5	TC-S1 13/06	TC-S1 13/08	TC-S1 13/10	TC-S1 13/12	TC-S1 13/16	TC-S1 13/20
14G	2.1	TC-S1 14/06	TC-S1 14/08	TC-S1 14/10	TC-S1 14/12	TC-S1 14/16	TC-S1 14/20
15G	1.8	TC-S1 15/06	TC-S1 15/08	TC-S1 15/10	TC-S1 15/12	TC-S1 15/16	TC-S1 15/20
16G	1.6	TC-S1 16/06	TC-S1 16/08	TC-S1 16/10	TC-S1 16/12	TC-S1 16/16	TC-S1 16/20
17G	1.4	TC-S1 17/06	TC-S1 17/08	TC-S1 17/10	TC-S1 17/12	TC-S1 17/16	TC-S1 17/20
18G	1.2	TC-S1 18/06	TC-S1 18/08	TC-S1 18/10	TC-S1 18/12	TC-S1 18/16	TC-S1 18/20
19G	1.0	TC-S1 19/06	TC-S1 19/08	TC-S1 19/10	TC-S1 19/12	TC-S1 19/16	TC-S1 19/20
20G	0.9	TC-S1 20/06	TC-S1 20/08	TC-S1 20/10	TC-S1 20/12	TC-S1 20/16	TC-S1 20/20
21G	0.8	TC-S1 21/06	TC-S1 21/08	TC-S1 21/10	TC-S1 21/12	TC-S1 21/16	TC-S1 21/20

Diâmetro		C O M P R I M E N T O				
Gauge	mm	25	30	35 cm	45 cm	60 cm
12G	2.8	TC-S1 12/25	TC-S1 12/30	TC-S1 12/35	TC-S1 12/45	TC-S1 12/60
13G	2.5	TC-S1 13/25	TC-S1 13/30	TC-S1 13/35	TC-S1 13/45	TC-S1 13/60
14G	2.1	TC-S1 14/25	TC-S1 14/30	TC-S1 14/35	TC-S1 14/45	TC-S1 14/60
15G	1.8	TC-S1 15/25	TC-S1 15/30	TC-S1 15/35	TC-S1 15/45	TC-S1 15/60
16G	1.6	TC-S1 16/25	TC-S1 16/30	TC-S1 16/35	TC-S1 16/45	TC-S1 16/60
17G	1.4	TC-S1 17/25	TC-S1 17/30	TC-S1 17/35	TC-S1 17/45	TC-S1 17/60
18G	1.2	TC-S1 18/25	TC-S1 18/30	TC-S1 18/35	TC-S1 18/45	TC-S1 18/60
19G	1.0	TC-S1 19/25	TC-S1 19/30	TC-S1 19/35	TC-S1 19/45	TC-S1 19/60
20G	0.9	TC-S1 20/25	TC-S1 20/30	TC-S1 20/35	TC-S1 20/45	TC-S1 20/60
21G	0.8	TC-S1 21/25	TC-S1 21/30	TC-S1 21/35	TC-S1 21/45	TC-S1 21/60


Modelo: TC-S2

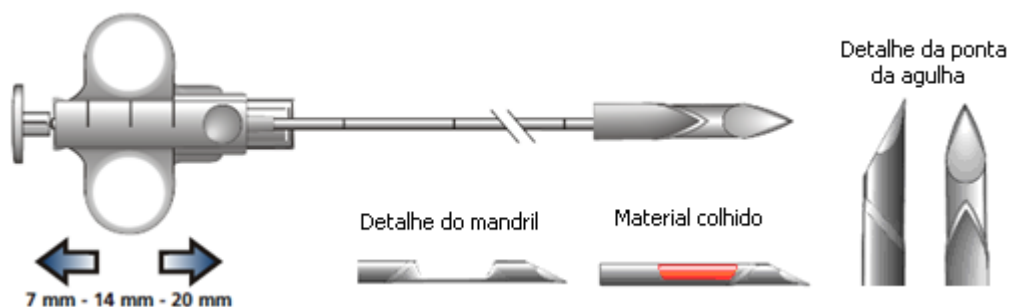

Diâmetro		C O M P R I M E N T O					
Gauge	mm	6	8	10 cm	12 cm	16 cm	20 cm
12G	2.8	TC-S2 12/06	TC-S2 12/08	TC-S2 12/10	TC-S2 12/12	TC-S2 12/16	TC-S2 12/20
13G	2.5	TC-S2 13/06	TC-S2 13/08	TC-S2 13/10	TC-S2 13/12	TC-S2 13/16	TC-S2 13/20
14G	2.1	TC-S2 14/06	TC-S2 14/08	TC-S2 14/10	TC-S2 14/12	TC-S2 14/16	TC-S2 14/20
15G	1.8	TC-S2 15/06	TC-S2 15/08	TC-S2 15/10	TC-S2 15/12	TC-S2 15/16	TC-S2 15/20
16G	1.6	TC-S2 16/06	TC-S2 16/08	TC-S2 16/10	TC-S2 16/12	TC-S2 16/16	TC-S2 16/20
17G	1.4	TC-S2 17/06	TC-S2 17/08	TC-S2 17/10	TC-S2 17/12	TC-S2 17/16	TC-S2 17/20
18G	1.2	TC-S2 18/06	TC-S2 18/08	TC-S2 18/10	TC-S2 18/12	TC-S2 18/16	TC-S2 18/20
19G	1.0	TC-S2 19/06	TC-S2 19/08	TC-S2 19/10	TC-S2 19/12	TC-S2 19/16	TC-S2 19/20
20G	0.9	TC-S2 20/06	TC-S2 20/08	TC-S2 20/10	TC-S2 20/12	TC-S2 20/16	TC-S2 20/20
21G	0.8	TC-S2 21/06	TC-S2 21/08	TC-S2 21/10	TC-S2 21/12	TC-S2 21/16	TC-S2 21/20

Diâmetro		C O M P R I M E N T O				
Gauge	mm	25	30	35 cm	45 cm	60 cm
12G	2.8	TC-S2 12/25	TC-S2 12/30	TC-S2 12/35	TC-S2 12/45	TC-S2 12/60
13G	2.5	TC-S2 13/25	TC-S2 13/30	TC-S2 13/35	TC-S2 13/45	TC-S2 13/60
14G	2.1	TC-S2 14/25	TC-S2 14/30	TC-S2 14/35	TC-S2 14/45	TC-S2 14/60
15G	1.8	TC-S2 15/25	TC-S2 15/30	TC-S2 15/35	TC-S2 15/45	TC-S2 15/60
16G	1.6	TC-S2 16/25	TC-S2 16/30	TC-S2 16/35	TC-S2 16/45	TC-S2 16/60
17G	1.4	TC-S2 17/25	TC-S2 17/30	TC-S2 17/35	TC-S2 17/45	TC-S2 17/60
18G	1.2	TC-S2 18/25	TC-S2 18/30	TC-S2 18/35	TC-S2 18/45	TC-S2 18/60
19G	1.0	TC-S2 19/25	TC-S2 19/30	TC-S2 19/35	TC-S2 19/45	TC-S2 19/60
20G	0.9	TC-S2 20/25	TC-S2 20/30	TC-S2 20/35	TC-S2 20/45	TC-S2 20/60
21G	0.8	TC-S2 21/25	TC-S2 21/30	TC-S2 21/35	TC-S2 21/45	TC-S2 21/60


Modelo: TC-SP

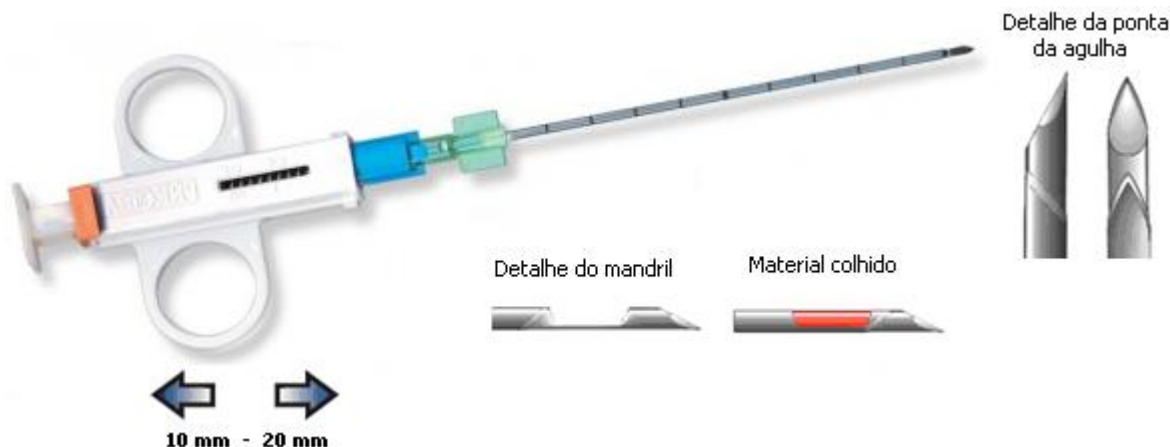

Diâmetro		C O M P R I M E N T O					
Gauge	mm	6	8	10 cm	12 cm	16 cm	20 cm
12G	2.8	TC-SP 12/06	TC-SP 12/08	TC-SP 12/10	TC-SP 12/12	TC-SP 12/16	TC-SP 12/20
13G	2.5	TC-SP 13/06	TC-SP 13/08	TC-SP 13/10	TC-SP 13/12	TC-SP 13/16	TC-SP 13/20
14G	2.1	TC-SP 14/06	TC-SP 14/08	TC-SP 14/10	TC-SP 14/12	TC-SP 14/16	TC-SP 14/20
15G	1.8	TC-SP 15/06	TC-SP 15/08	TC-SP 15/10	TC-SP 15/12	TC-SP 15/16	TC-SP 15/20
16G	1.6	TC-SP 16/06	TC-SP 16/08	TC-SP 16/10	TC-SP 16/12	TC-SP 16/16	TC-SP 16/20
17G	1.4	TC-SP 17/06	TC-SP 17/08	TC-SP 17/10	TC-SP 17/12	TC-SP 17/16	TC-SP 17/20
18G	1.2	TC-SP 18/06	TC-SP 18/08	TC-SP 18/10	TC-SP 18/12	TC-SP 18/16	TC-SP 18/20
19G	1.0	TC-SP 19/06	TC-SP 19/08	TC-SP 19/10	TC-SP 19/12	TC-SP 19/16	TC-SP 19/20
20G	0.9	TC-SP 20/06	TC-SP 20/08	TC-SP 20/10	TC-SP 20/12	TC-SP 20/16	TC-SP 20/20
21G	0.8	TC-SP 21/06	TC-SP 21/08	TC-SP 21/10	TC-SP 21/12	TC-SP 21/16	TC-SP 21/20

Diâmetro		C O M P R I M E N T O				
Gauge	mm	25	30	35 cm	45 cm	60 cm
12G	2.8	TC-SP 12/25	TC-SP 12/30	TC-SP 12/35	TC-SP 12/45	TC-SP 12/60
13G	2.5	TC-SP 13/25	TC-SP 13/30	TC-SP 13/35	TC-SP 13/45	TC-SP 13/60
14G	2.1	TC-SP 14/25	TC-SP 14/30	TC-SP 14/35	TC-SP 14/45	TC-SP 14/60
15G	1.8	TC-SP 15/25	TC-SP 15/30	TC-SP 15/35	TC-SP 15/45	TC-SP 15/60
16G	1.6	TC-SP 16/25	TC-SP 16/30	TC-SP 16/35	TC-SP 16/45	TC-SP 16/60
17G	1.4	TC-SP 17/25	TC-SP 17/30	TC-SP 17/35	TC-SP 17/45	TC-SP 17/60
18G	1.2	TC-SP 18/25	TC-SP 18/30	TC-SP 18/35	TC-SP 18/45	TC-SP 18/60
19G	1.0	TC-SP 19/25	TC-SP 19/30	TC-SP 19/35	TC-SP 19/45	TC-SP 19/60
20G	0.9	TC-SP 20/25	TC-SP 20/30	TC-SP 20/35	TC-SP 20/45	TC-SP 20/60
21G	0.8	TC-SP 21/25	TC-SP 21/30	TC-SP 21/35	TC-SP 21/45	TC-SP 21/60

Modelo: TC-S3

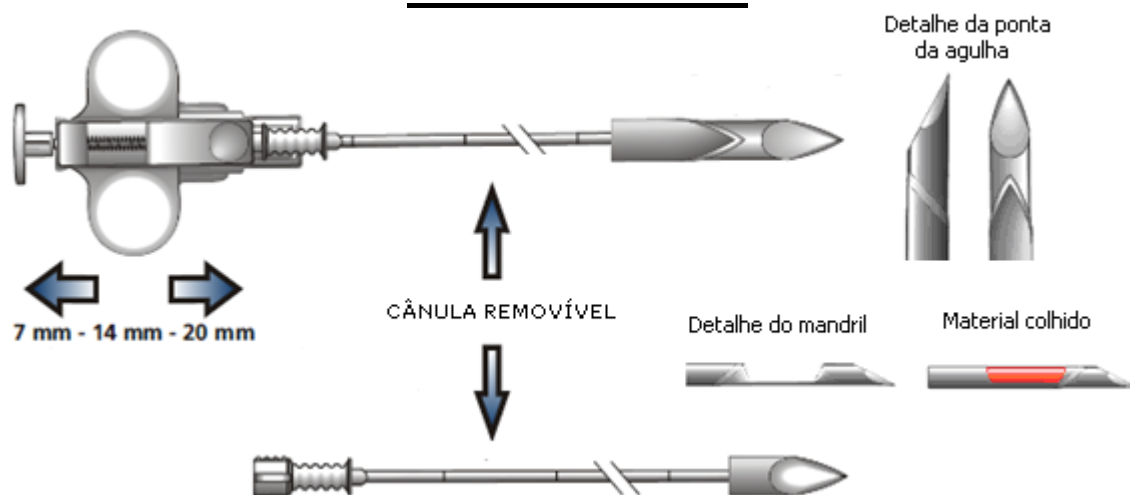

Diâmetro		C O M P R I M E N T O					
Gauge	mm	6	8	10 cm	12 cm	16 cm	20 cm
12G	2.8	TC-S3 12/06	TC-S3 12/08	TC-S3 12/10	TC-S3 12/12	TC-S3 12/16	TC-S3 12/20
13G	2.5	TC-S3 13/06	TC-S3 13/08	TC-S3 13/10	TC-S3 13/12	TC-S3 13/16	TC-S3 13/20
14G	2.1	TC-S3 14/06	TC-S3 14/08	TC-S3 14/10	TC-S3 14/12	TC-S3 14/16	TC-S3 14/20
15G	1.8	TC-S3 15/06	TC-S3 15/08	TC-S3 15/10	TC-S3 15/12	TC-S3 15/16	TC-S3 15/20
16G	1.6	TC-S3 16/06	TC-S3 16/08	TC-S3 16/10	TC-S3 16/12	TC-S3 16/16	TC-S3 16/20
17G	1.4	TC-S3 17/06	TC-S3 17/08	TC-S3 17/10	TC-S3 17/12	TC-S3 17/16	TC-S3 17/20
18G	1.2	TC-S3 18/06	TC-S3 18/08	TC-S3 18/10	TC-S3 18/12	TC-S3 18/16	TC-S3 18/20
19G	1.0	TC-S3 19/06	TC-S3 19/08	TC-S3 19/10	TC-S3 19/12	TC-S3 19/16	TC-S3 19/20
20G	0.9	TC-S3 20/06	TC-S3 20/08	TC-S3 20/10	TC-S3 20/12	TC-S3 20/16	TC-S3 20/20
21G	0.8	TC-S3 21/06	TC-S3 21/08	TC-S3 21/10	TC-S3 21/12	TC-S3 21/16	TC-S3 21/20

Diâmetro		C O M P R I M E N T O				
Gauge	mm	25	30	35 cm	45 cm	60 cm
12G	2.8	TC-S3 12/25	TC-S3 12/30	TC-S3 12/35	TC-S3 12/45	TC-S3 12/60
13G	2.5	TC-S3 13/25	TC-S3 13/30	TC-S3 13/35	TC-S3 13/45	TC-S3 13/60
14G	2.1	TC-S3 14/25	TC-S3 14/30	TC-S3 14/35	TC-S3 14/45	TC-S3 14/60
15G	1.8	TC-S3 15/25	TC-S3 15/30	TC-S3 15/35	TC-S3 15/45	TC-S3 15/60
16G	1.6	TC-S3 16/25	TC-S3 16/30	TC-S3 16/35	TC-S3 16/45	TC-S3 16/60
17G	1.4	TC-S3 17/25	TC-S3 17/30	TC-S3 17/35	TC-S3 17/45	TC-S3 17/60
18G	1.2	TC-S3 18/25	TC-S3 18/30	TC-S3 18/35	TC-S3 18/45	TC-S3 18/60
19G	1.0	TC-S3 19/25	TC-S3 19/30	TC-S3 19/35	TC-S3 19/45	TC-S3 19/60
20G	0.9	TC-S3 20/25	TC-S3 20/30	TC-S3 20/35	TC-S3 20/45	TC-S3 20/60
21G	0.8	TC-S3 21/25	TC-S3 21/30	TC-S3 21/35	TC-S3 21/45	TC-S3 21/60

ACESSÓRIOS

Trava de proteção

Pefurador - ponta
peramidal


Tabela comparativa dos produtos:

Produto	gauge	comprimento
Modelo TC-S1	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21G	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 45 e 60 cm
Modelo TC-S2	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21G	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 45 e 60 cm
Modelo TC-SP	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21G	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 45 e 60 cm
Modelo TC-S3	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21G	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 45 e 60 cm

INSTRUÇÕES DE USO:

DETALHE dos CABOS – ALAVANCA DE ARMAR

Alavanca de armar

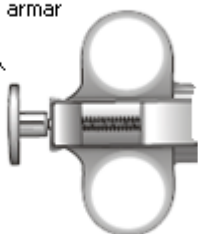

Alavanca de armar



01. O procedimento é realizado em local asséptico de acordo com a técnica padronizada pela unidade de saúde;
02. Verificar a data de validade e a integridade da embalagem estéril;
03. Certificar-se de que o produto esteja isento de qualquer tipo de dano;



UNIT Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

FONE: (11) 5536.9331 – FAX: (11) 5542.6850 – E-mail: unit.ciel@terra.com.br

04. Verificar se o produto se aplica para a finalidade desejada, em relação a suas dimensões e ao modelo;
05. Preparar o paciente de acordo com o protocolo correspondente à técnica médica utilizada;
06. O mais próximo possível do momento do uso, abrir a embalagem do produto e retirar as proteções;
07. Armar a agulha puxando a alavanca de armar no cabo (ver desenho acima) até escutar o “clic” da trava da mola do mecanismo interno do cabo. Nesta situação a agulha está armada;
08. Na região do corpo do paciente, pré marcada pelo médico, introduzir a agulha até atingir o limite onde se inicia a região onde será coletado o material para biópsia, acompanhando o posicionamento da ponta da agulha através do ultrassom;
09. Apertar a alavanca de armar na direção contrária de quando a agulha foi armada, destravando a mola provocando o disparo da agulha na direção do interior da região onde será coletado o material para biópsia;
10. Disparada a agulha, primeiramente se movimenta o seu mandril para o interior da região onde se fará a coleta de material e, em seguida, se movimenta a cânula cortando o tecido que se acomodou no rebaixo do mandril, fechando este rebaixo e evitando a saída do material colhido;
11. Retirar agulha puxando pelo cabo no sentido contrário ao de sua penetração;
12. Remover a amostra coletada, avançando o mandril da agulha até aparecer o seu rebaixo com a amostra acomodada dentro dele e enviá-la ao laboratório de patologia;
13. Finalizado o procedimento fazer o descarte da agulha em local apropriado para materiais cortantes potencialmente contaminados.

CUIDADOS:

- Estas instruções são apenas de orientação geral.
- Cada médico deve adotar o procedimento apropriado em função de seus próprios conhecimentos e experiência, no tipo de procedimento a ser realizado.

ADVERTÊNCIAS E/OU PRECAUÇÕES A SEREM ADOTADAS:

ESTÉRIL.

PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO.

PROIBIDO REPROCESSAMENTO.

DESCARTAR APÓS O USO.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Estocar a temperatura ambiente ao abrigo da umidade e incidência direta da luz.



UNIT Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

FONE: (11) 5536.9331 – FAX: (11) 5542.6850 – E-mail: unit.ciel@terra.com.br

DESCARTE:

- Descartar o conjunto usado em local apropriado para materiais cortantes, potencialmente contaminados.

Observação: A empresa UNIT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, comunica que, os produtos descritos acima, atendem o disposto da RDC 97/2000 (família de produtos para saúde) conforme o art. 1º em suas letras, a, b e c.